

Indicadores Químicos Hojas de test Bowie and Dick

El test de Bowie and Dick es básicamente una prueba de penetración y remoción del vapor. Su resultado aprueba o desaprueba dichas características.

El color inicial es azul, la transición es rosado y después de esto, el color del indicador permanece sin cambios. Su documentación es completamente segura.

Su uso es obligatorio según la norma EN 564 sobre **Validación y control rutinario de esterilizadores al vapor**, la cual especifica en el Capítulo 6.3.4: «Cuando el proceso incluye remoción del aire del producto, el test de penetración de vapor debe ser realizado al comenzar cada día».



Indicadores Químicos Paquete de test Bowie and Dick para 15 usos

El paquete del test está elaborado de un papel con filtro reutilizable quince (15) veces.

La hoja está impresa con una tinta estable para esterilización. La plantilla impresa permite una guía perfecta para documentación.

Un indicador adicional del centro del paquete hace más fácil reemplazar la hoja. El marco de acero inoxidable es reutilizable innumerables veces.

Por esto, es una solución muy práctica que le ahorra tiempo y materiales en la preparación del paquete.




PBX: 2516284
© 2248930 - 5470058 / Fax: 2248910
Carrera 72-A N° 70-17
Bogotá, D.C. - Colombia
surgiplast@labgothaplast.com.co
www.surgiplast.com.co


steriCLIN
VP MEDICAL PACKAGING

surgiPLAST
MEDICAL PRODUCTS-PACKAGING


**TABLA DE CAMBIOS DE COLORES LÍMITES
PARA HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK**

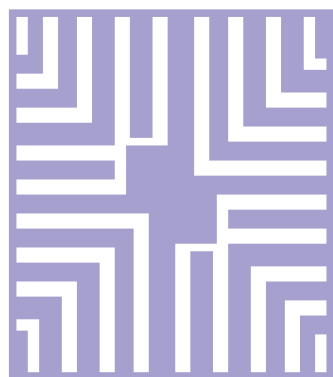

HOJA DE PRUEBA

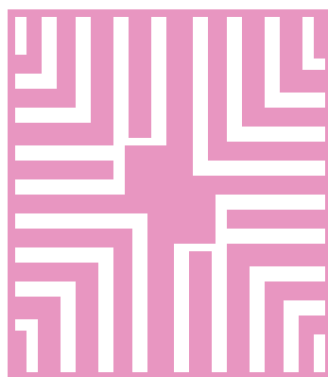


PRUEBA EXITOSA

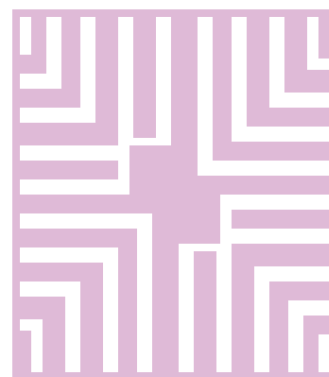


PRUEBA EXITOSA


**LIBRE DE
METALES PESADOS
CONFIABLE
INCORRUPTIBLE**

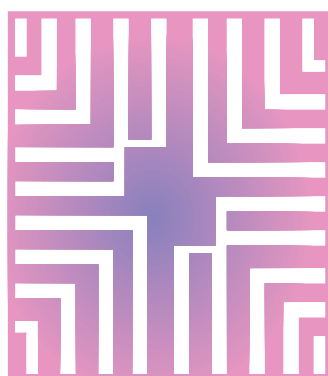

PRUEBA FALLIDA

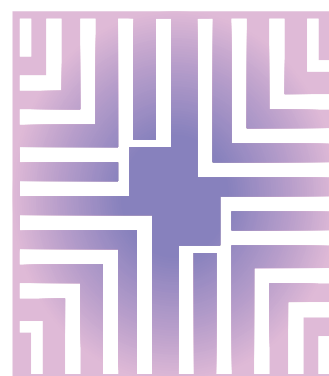

PRUEBA FALLIDA

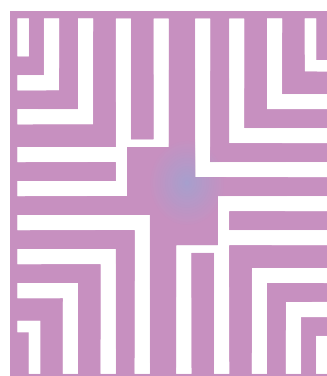

PRUEBA FALLIDA

